

抗原検査キットの使用法（フロー）

デンカ(株)クイックナビ-COVID19Ag(8min)



0. 準備

二次元コードから、動画をご覧ください。

このキットでの検査は、症状が出た際に行います。**（無症状の方は、使用できません）**

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/coronaline/howto-kougenkensa2_8min.html



1. 検体のとり方

① 綿棒を鼻の入り口から2cm程度、粘膜部分をめぐうようにしてゆっくり挿入します。

② 綿棒を**5回**程度ゆっくり回転させます。

③ **5秒**たち、綿棒が十分湿った後、そっと引き抜きます。

（幼児等、鼻が小さくて綿棒が2cm入らない場合は、入るところまでで結構です）



2. 検体の抽出

チューブのアルミシールをはがし、綿棒をチューブ内の検体浮遊液に浸します。

チューブの外側から綿球部分を**はさみ押さえ上下に動かしながら10回程度かき混ぜます。**

チューブの外側から綿球部分をつまんで、綿球部分を絞るように綿棒を引き抜きます。



3. キャップをはめる


チューブにキャップをはめ込みます。



4. 3滴 たらす

キャップを付けたままチューブを逆さにし、チューブを軽く押し、

液をキットの右端の「**滴×3**」と表示のある窓枠に**3滴**たらし、**8分間**待ちます。

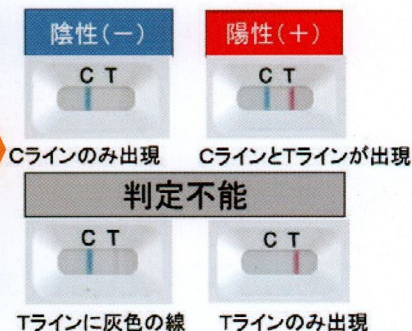

5. 反応時間・判定

8分後速やかに判定を行います。

時間が長すぎても短すぎても正しい結果になりませんので、必ず**タイマー**を使用してください。

※「陽性」の場合はCラインとTラインが出現します。Tラインが灰色の場合やCラインが見えなくなった場合は判定不能です。

※「判定不能」の場合はもう一度検査してください。



6. 二次元コードから連絡

二次元コードから、判定結果をご連絡ください。

結果に応じたその後の対応をご案内します。

※LINE登録できない方は別途送付したメールから、使用後の対応を確認願います。

7. その他

使用後のキット等は、ビニール袋に入れ、しっかり口を縛りごみに出します。